



« راهنمای ورود، ثبت نتایج و مشاهده آنالیز در برنامه Peer Group »

راهنمای ورود در برنامه همگروه و ثبت اطلاعات:

پس از دریافت نمونه سرم کنترل، همگروه آزمایشگاه شما توسط دفتر برنامه در اول هر ماه تشکیل خواهد شد.

➤ جهت ورود به برنامه و ثبت داده های همگروه می بایست به سامانه مدیریت همگروه به نشانی peer.iacld.com مراجعه نمایید.

(با شناسه کاربری و رمز عبور برنامه کنترل کیفیت خارجی (EQAP) آزمایشگاه خود، وارد برنامه همگروه شوید.)

➤ پس از ورود به پنل کاربری آزمایشگاه خود بر روی منوی "ورود داده های همگروه" کلیک نموده و سپس با کلیک بر روی گزینه ورود نتایج با توجه به سری ساخت سرم کنترل مورد استفاده وارد صفحه بعد شده. در صفحه پیش رو با باز کردن select Test در بالای صفحه، تست مورد نظر را با توجه به دستورالعمل انتخاب نمائید. سپس بر روی علائم پیکان سمت چپ در کنار کلمه Save که در تصویر شماره ۴ نشان داده شده کلیک نمائید.

➤ طبق زمانبندی سایت برای هر تست با توجه به دستورالعمل ارسال شده روزانه ورود اطلاعات نمائید. توجه داشته باشید امکان ورود نتایج در روز بعد وجود ندارد.

➤ سپس بر روی دکمه save، کلیک نموده تا نتیجه تست ذخیره شود.





انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی - ایران
برنامه ارزیابی کیفیت (Peer Group)
دوره پنجم (سال ۱۴۰۳)



Laboratory Name: [] Save

Bio.G.PeerGroup.03.00 - Biochemistry-General

-- Select Test --

Peer Group Results

Your Lab: [] Peer Group: []

Included Runs: 0
Total Bias%: 0.00

CV کمتر میزان CV

جدائی تعداد همگروه

نتیجه آزمایشگاه نتیجه همگروه تعداد همگروه

تاریخ

بیمار

Laboratory Name: [] Save

Bio.G.PeerGroup.03.00 - Biochemistry-General

-- Select Test --

Peer Group Results

Your Lab: [] Peer Group: []

Included Runs: 0
Total Bias%: 0.00

CV کمتر میزان CV

جدائی تعداد همگروه

نتیجه آزمایشگاه نتیجه همگروه تعداد همگروه

تاریخ

بیمار

Laboratory Name: [] Save

Bio.G.PeerGroup.03.00 - Biochemistry-General - Glucose

Glucose - mg/dL

Bio.G.PeerGroup.03.003-010-G-06 1403/07 104.00 Glucose (mg/dL)

Bio.G.PeerGroup.03.003-010-G-05 1403/06 105.00 Glucose (mg/dL)

Bio.G.PeerGroup.03.003-010-G-04 1403/04 105.00 Glucose (mg/dL)

Bio.G.PeerGroup.03.003-010-G-03 1403/03 101.00 Glucose (mg/dL)

Bio.G.PeerGroup.03.003-010-G-02 1403/02 105.00 Glucose (mg/dL)

Bio.G.PeerGroup.03.003-010-G-01 1403/01 101.00 Glucose (mg/dL)

Bio.G.PeerGroup.03.003-010-G-12 1403/14 112.00 Glucose (mg/dL)

Bio.G.PeerGroup.03.003-010-G-11 1403/13 104.00 Glucose (mg/dL)

Bio.G.PeerGroup.03.003-010-G-10 1403/10 105.00 Glucose (mg/dL)

Bio.G.PeerGroup.03.003-010-G-09 1403/09 106.00 Glucose (mg/dL)

Bio.G.PeerGroup.03.003-010-G-08 1403/08 106.00 Glucose (mg/dL)

Bio.G.PeerGroup.03.003-010-G-07 1403/07 104.00 Glucose (mg/dL)


توجه: برای هر تست ذکر شده در دستورالعمل مراحل انتخاب تست تا ذخیره نتیجه ، بصورت جداگانه انجام شود.



انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی - ایران
برنامه ارزیابی کیفیت (Peer Group)
دوره پنجم (سال ۱۴۰۳)



- پس از آنالیز تست ها در روز بعد علاوه بر منحنی هر تست برای آزمایشگاه شما ، منحنی مقایسه ای با آزمایشگاه های همگروه ، میانگین همگروه ، $CV\%$ همگروه و DI و $TAE\%$ آزمایشگاه نیز در اختیار شما قرار می گیرد.

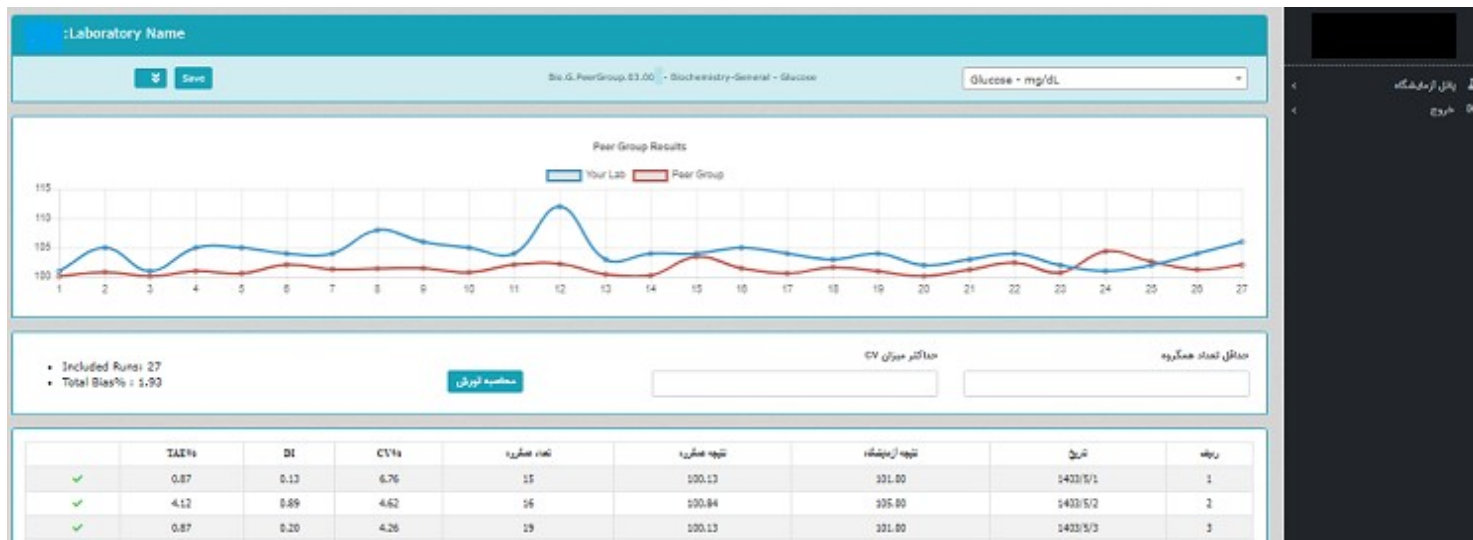

- در صورتیکه CV همگروه شما در هر روز کاری بالاتر از CV مجاز باشد، میتوانید با انتخاب CV مورد نظر و یا تعداد همگروه ها، میزان Bias در محدوده CV تعیین شده را بدست آورید.